

Flowmaster

Uroflussimetro wireless basato su PC



Caratteristiche di Flowmaster

- ! Wireless, piccolo e leggero
- ! Registrazione ed analisi completamente automatizzate del flusso urinario
- ! Rilevamento automatico degli artefatti
- ! Selezione automatica della scala di flusso e volume
- ! Database pazienti per la conservazione sicura dei dati del flusso urinario
- ! Si possono far funzionare fino a 7 Flowmaster (simultaneamente) da un solo computer, fornendo una soluzione ottimale per i reparti di urologia con grande carico di lavoro
- ! Stampa di referti a colori con i dati del paziente, risultati, grafici, nomogrammi, commenti e logo dell'ospedale
- ! Disponibile con asta per supporto del sacchetto per la raccolta delle urine regolabile in altezza e/o con una varietà di sedie per minzione



Sensore di flusso posizionato su un'asta per sacchetto di raccolta delle urine, regolabile in altezza, sotto la sedia per minzione

Flowmaster è un flussimetro wireless basato su computer per uroflussimetria rapida, semplice e conveniente.


Grazie alla tecnologia Bluetooth®, Flowmaster dispone di un collegamento wireless tra il trasduttore di flusso a batteria e il PC/portatile. Niente più cavi! Il trasduttore di flusso può essere posizionato in un'altra stanza o in una toilette per la massima privacy del paziente. Le registrazioni dei dati e del flusso urinario del paziente vengono archiviate sul PC o portatile.

Essendo la facilità d'uso la sua priorità, Flowmaster inizia a registrare automaticamente quando il paziente inizia lo svuotamento. Un algoritmo speciale del software riduce automaticamente gli artefatti e seleziona le scale di flusso/volume ottimali. I tempi di pre-flusso e post-flusso sono selezionabili dall'utente.

Flowmaster necessita di un portatile o di un PC* con sistema operativo Windows® standard, utilizzabili contemporaneamente per il normale lavoro d'ufficio. I dati del flusso urinario vengono archiviati in un database pazienti di semplice utilizzo.

I referti possono essere personalizzati e stampati a colori, con i dati del paziente, i risultati, i grafici, i nomogrammi, i commenti ed il logo dell'ospedale.

* Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o Windows 8 (64bit)

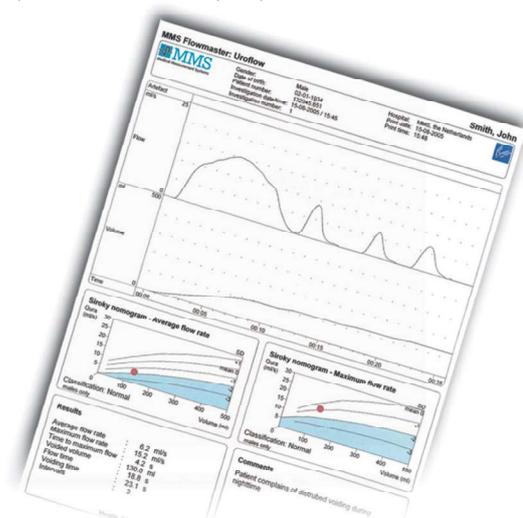

MED ITALIA SERVICE
Servizi e Forniture Medicali

Via delle barozze 6 A - 00040 - Rocca di Papa (Rm)
Partita iva: 16193371008 Numero REA: RM - 1640791
SDI: M5UXCR1

info@meditaliaservice.com
meditaliaservicesrls@pec.it
www.meditaliaservice.com
shop.meditaliaservice.com
+393318867334

