




# T-DOC<sup>®</sup>

## Cateteri Air-Charged<sup>™</sup>

PROGETTATI PER ESSERE SEMPLICI ED EFFICIENTI

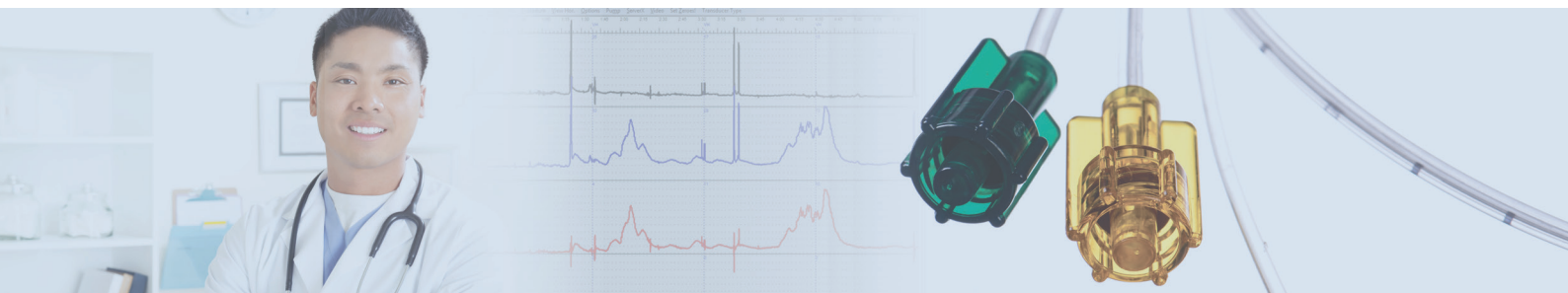

*Innovation for Pelvic Health*


# Cateteri T-DOC® Air-Charged™

## ACCURATI E PRECISI PER LA SICUREZZA NELLA DIAGNOSTICA


I Cateteri T-DOC® Air-Charged™ misurano le pressioni urodinamiche mediante la tecnologia a pressione a marchio registrato "Air-Charged", che assicura una quantità molto inferiore di artefatti e diagnosi più precise. I cateteri Air-Charged sono più precisi, nonché di più facile apprendimento e utilizzo, e garantiscono un risparmio significativo in termini di tempi e costi durante la preparazione, l'esame e la pulizia finale.

- **FACILI DA USARE.** Impostazione rapida e semplice che riduce il tempo di preparazione di 15 minuti in confronto all'utilizzo dei cateteri fluid-filled.
- **ACCURATI.** Producono un'area di contatto circonferenziale a 360 gradi. I cateteri fluid-filled misurano in un solo punto, causando letture incoerenti dei valori di pressione.
- **PRECISI.** La colonna d'aria non viene influenzata da errori nella pressione idrostatica che portano a confusione. La massa d'acqua aggiunge errori indesiderati di pressione, dovuti al movimento del paziente, al cambiamento d'altezza e alle bolle d'aria.
- **ECONOMICI.** I costi relativi a forniture extra vengono eliminati. Gli esami fluid-filled richiedono accessori extra quali siringhe, tubi, acqua, trasduttori esterni e rubinetti.
- **AFFIDABILI.** Forniscono pressioni sottratte più pulite. L'artefatto rettale è comune durante gli esami fluid-filled.

### Impostazione dell'esame con cateteri T-DOC® Air-Charged™

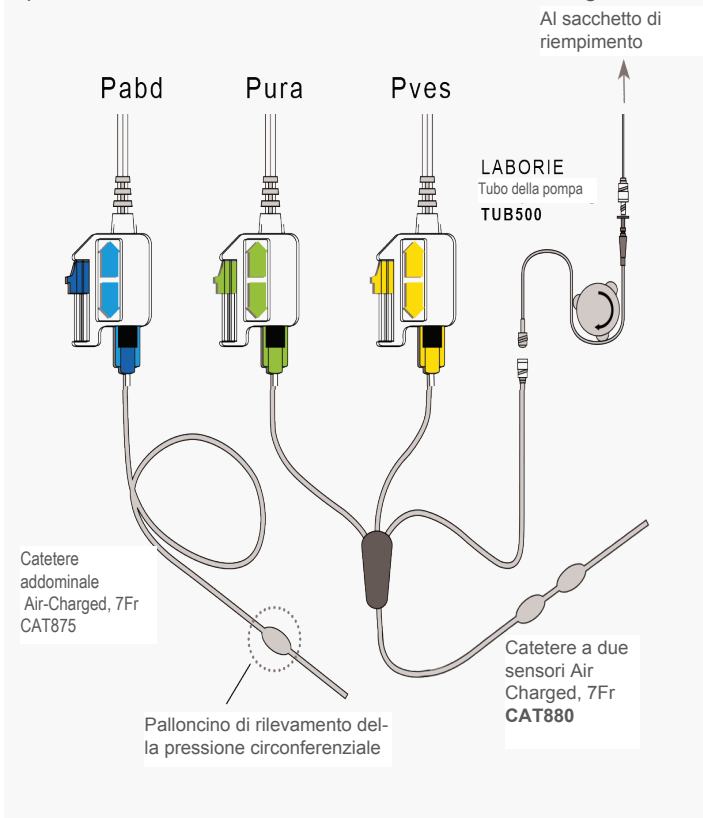

### Impostazione dell'esame con catetere fluid-filled

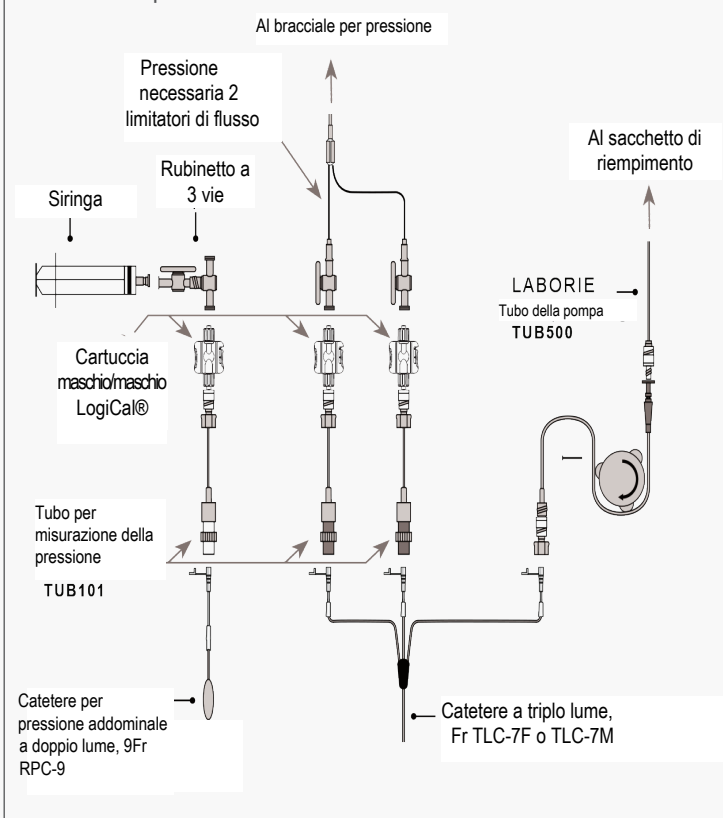

**MED ITALIA SERVICE**

Servizi e Forniture Medicali

Via delle barozze 6 A - 00040 - Rocca di Papa (Rm)

Partita Iva: 16193371008 Numero REA: RM - 1640791  
SDE: MSUXCR1

info@meditaliaservice.com  
meditaliaservicesris@pec.it  
www.meditaliaservice.com  
shop.meditaliaservice.com

+393318867334



USA:

Tel: +1 802 857 1300

800 522 6743

Fax: +1 802 878 1122

Email: usmarketing@laborie.com

EUROPE:

Tel: +44 1788 547888

Fax: +44 1788 571652

Email: euromarketing@laborie.com

CANADA/INTERNATIONAL:

Tel: +1 905 612 1170

Fax: +1 905 612 9731

Email: intlmarketing@laborie.com

www.laborie.com

